

# WAARSCHUWINGEN

## VEILIGHEIDSGEGEGENEN EN VEILIGHEIDSGEBRUIK

### VEILIGHEIDSGEGEGENEN EN VEILIGHEIDSGEBRUIK


- **D**IT is een elektrisch apparaat dat radiofrequentie golven gebruikt. Houd u daarom aan de volgende voorzorgsmaatregelen:
- **D**IT toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met fysieke, sensorische of mentale beperkingen en door personen zonder voorafgaande ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder geschikt toezicht staan of nadat ze duidelijke veiligheidsinstructies ontvangen en de gevaren verbonden aan het gebruik van het toestel volledig begrepen hebben. Dit toestel is geen speelgoed. Het reinigen en het onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.
- **G**EBRUIK het apparaat alleen waar het voor bedoeld is zoals beschreven in deze handleiding.
- **D**OE het apparaat alleen aan voor de behandeling.
- **G**EBRUIK het apparaat niet als het uit elkaar is gehaald of is beschadigd of als het elektrische snoer is beschadigd.
- **G**EBRUIK het apparaat niet in de buurt van vlambare vloeistoffen (alcohol, aceton).
- **D**ROOG uw handen en gezicht goed voor u met de behandeling begint.
- **H**OUD het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- **L**EG het apparaat niet neer, bewaar het niet en gebruik het niet in de buurt van water zoals bij de wastafel of bad. Als het apparaat nat is of in het water valt mag u het apparaat niet aanraken. Haal meteen de stekker uit het stopcontact.
- **M**ETEEN na gebruik en nog voor u het apparaat schoonmaakt, doet u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- **G**EBRUIK alleen de kabel met stekker voor het apparaat die bij de NEWA is geleverd. Een andere stroomvoorziening kan het apparaat beschadigen.

### CONTRA INDICATIES (WANNEER U DE NEWA NIET MAG GEBRUIKEN)

- Gebruik de NEWA niet als een van de volgende criteria voor u van toepassing zijn:
- **A**ls u een pacemaker of arrhythmias of een andere serieuze hartziekte heeft.
  - **A**ls zich een geïmplanteed metalen apparaat of lichaamspiercing in het te behandelen gebied bevindt.
  - **A**ls er een vorm van verdachte huidlesies in het te behandelen gebied bevindt.
  - **B**ij zwangerschap of borstvoeding.
  - **A**ls u lijdt aan een auto-immune ziekte of diabetes.
  - **A**ls u problemen heeft met uw bloedstolling.
  - **A**ls u bloedverduunners gebruikt.
  - **A**ls u de afgelopen twee maanden Isotretinoin (Accutaan) heeft gebruikt.
  - **A**ls u twijfelt over een andere medische aandoening of medicatie die effect kan hebben op de behandeling, neem dan contact op met uw dokter.

### WAARSCHUWINGEN

- **G**ebruik de NEWA niet op uw oogleden, wenkbrauwen, lippen, oren, borsten en in het genitale gebied.
- **G**ebruik de NEWA niet op elk ander lichaamsdeel dan de aanbevolen lichaamsdelen die in de snelgids staan vermeld.
- **V**raag uw dokter of u de NEWA kunt gebruiken als u aan een auto-immune ziekte, diabetes of aan een bloedstollingsziekte lijdt.
- **G**ebruik de NEWA niet zonder de NEWA Lift gel voor Gevoelige huid. Het apparaat zal waarschijnlijk niet goed werken als het zonder de NEWA Lift gel voor Gevoelige huid. Het gebruikt of als het met een andere gel wordt gebruikt.

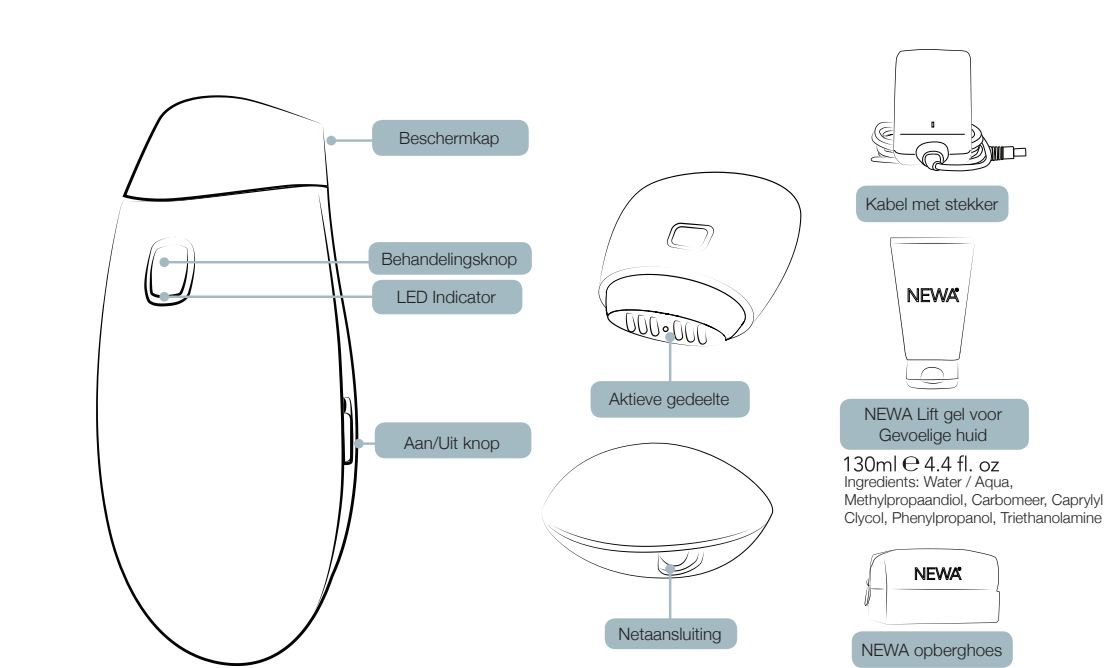

# 2 VOOR JE MET DE BEHANDELING BEGINT

## Voor u begint

Trek een paar minuten uit om deze belangrijke tips te lezen zodat u zeker weet dat u de veiligste en meest effectieve NEWA behandelingen krijgt.

### 1. Test


Lees voor u begint eerst de gebruiksaanwijzing die hieronder staat vermeld. Behandel eerst uw arm om te zien hoe uw huid op NEWA reageert.

### 2. Kies de lichaamsdelen die u wilt behandelen

Verdeel uw gezicht in 6 behandelplaatsen; 2 op uw wangen, 2 op uw kaaklijn en 2 onder uw kin en hals.

### 3. Bereid u voor op de behandeling

- Verwijder al uw sieraden van de gezichtsdelen die u wilt behandelen, zoals oorbellen, kettingen en ringen.
- Maak uw gezicht grondig schoon en goed droog. Verzekeer u ervan dat u al uw make-up en cremes heeft verwijderd van het te behandelen gezichtsdeel.

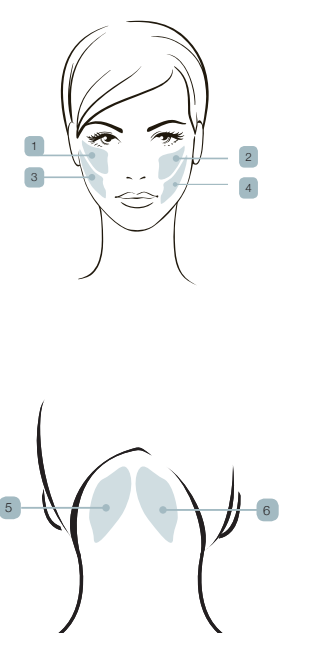

# 3 VOORBEREIDING VOOR DE BEHANDELING


**1 Doe de kabel van de stekker** in het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. **Verwijder de beschermkap.**

### 2 Breng de NEWA gel aan

Doe twee dikke 'lijnen' NEWA Lift gel voor Gevoelige huid op het actieve gedeelte van het apparaat. Plaats het NEWA actieve gedeelte op het te behandelen gezichtsdeel. Smeer de NEWA Lift gel voor Gevoelige huid met draaibewegingen van het midden naar de buitenkant van het gezichtsdeel uit.

Gebruik geen ander gelproduct met het NEWA apparaat.

**3 Doe het apparaat aan** -zet de Aan/Uit knop op - 2 - . Het LED lichtje gaat branden. We raden u aan om met het hogere warmte niveau (niveau '2') te beginnen maar als u dit een onprettig gevoel geeft kunt u op het lagere niveau (niveau '1') beginnen.

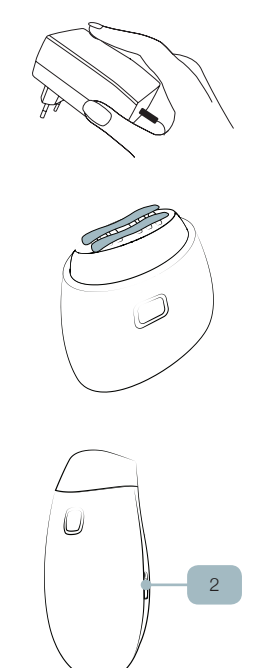

## Personaliseer uw NEWA® ervaring

Maximaliseer de verjongingsresultaten van uw huid met de gratis NEWA® mobiel applicatie. – een interactieve hulpbron die alles omvat om het meest uit uw NEWA® belevens te halen.



Zoek op "NEWA Endymed"  
Voor meer huidverzorgingsadvies of informatie:  
[www.newanederland.com](http://www.newanederland.com)

### EndyMed Medical Ltd.

Leshem Street 12,  
North Industrial Park  
Caesarea  
Postbus 3582  
Caesarea, Israël 3088900  
Tel. +972 (0) (4) 6309100  
Fax: +972 (0) (4) 6309101  
Web: [www.newabeauty.com](http://www.newabeauty.com)  
Email: [info@newabeauty.com](mailto:info@newabeauty.com)

### EU Vertegenwoordiger

**Dr. M. Burstein,**  
**Ivana Hribarja 22, 4207 Cerklje, Slovenia**

QsiteEU  
Gerrit van der Veenstraat 84HS  
1077 EL Amsterdam  
Nederland  
Tel. +31 (0) (20) 8110550  
Fax: +31 842213142  
Email: [QsiteEU@qsite-med.com](mailto:QsiteEU@qsite-med.com)

### Invoerder en verdeler in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg:

Distec International sa/nv –  
Les Portes de l'Europe - Rue Maurice Faure 1, 1401  
Nivelles, Belgique/België/Belgium – [www.distec.be](http://www.distec.be)  
Copyright © 2012 EndyMed Medical Ltd.  
NEWA®, 3DEEP® and EndyMed MedicalTM are  
trademarks of EndyMed Medical Ltd.

**Alle rechten voorbehouden.**  
Gepatenteerde technologie. 15

### WAARSCHUWING:

Gebruik dit cosmetisch product alleen voor het doel waarvoor het bestemd is en overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Dit cosmetisch product mag alleen gebruikt worden als geen gevoeligheid bekend is voor een van de ingrediënten. Niet inslikken of voor inwendig gebruik. Vermijd contact met ogen. In het geval van contact met ogen, goed met water spoelen. Houd bui - ten bereik van kinderen. Uit de buurt van directe warmte en zonlicht houden. Indien niet in gebruik, op een koele en droge plaats bewaren.



## 4 Behandeling

**1 Begin de behandeling** - Druk op de behandelingsknop en laat deze weer los om de energietoevoer te beginnen. Het LED lichtje gaat knipperen. **Verzekert u ervan dat het actieve gedeelte volledig contact met de huid maakt.** tijdens de behandeling terwijl u redelijke, comfortabele draaibewegingen maakt. Als de optimale huidtemperatuur van uw huid is bereikt, dan verandert het LED lichtje op de NEWA van blauw naar groen. Als u vindt dat uw huid te warm is, vergroot u gewoon de draaibewegingen tijdens de behandeling.



Stop niet met het maken van de draaibewegingen met het apparaat.

Om de behandeling te stoppen voordat de 4 minuten voorbij zijn, drukt u op de Aan/Uit knop.

**2 Ga door naar de volgende behandelingsplaats** - Als u de behandeling op het eerste behandelingsgedeelte heeft voltooid (een totaal van 4 minuten behandelingstijd), zal het LED lichtje stoppen met knipperen en het apparaat zal trillen om aan te geven dat de energie toevoer is gestopt.

Smeer meer NEWA Lift gel voor Gevoelige huid op het actieve gedeelte en herhaal de bovenstaande procedure op het volgende gezichtsgedeelte.

**3 Voltooi uw huidverzorgingsroutine** - haal voorzichtig het teveel aan behandelingsgel van uw gezicht. Maak uw gezicht goed schoon en smeer dan NEWA Rimpel Corrector of een andere huidverzorgingscreme op uw gezicht.

Om de resultaten met de NEWA te optimaliseren wordt aangeraden om de behandeling 3 tot 5 keer per week voor een periode van een maand uit te voeren. Aan het eind van de eerste maand kan het zijn dat u twee keer per week door wilt gaan met de onderhoudsbehandelingen. Als u stopt de NEWA te gebruiken zullen de resultaten minder worden. Als u de behandeling na een rustperiode weer opnieuw begint, kan het zijn dat u er voor kiest om de hele behandeling opnieuw te beginnen.

Om de NEWA veel gevraagde vragen of andere gebruikersinformatie te lezen gaat u naar [www.NewaNederland.com](http://www.NewaNederland.com)

### LABELING EN SPECIFICATIONS

Specificatie	NEWA apparaat
Energie verbruik	10W
Ingangsspanning	100-240VAC
Dimensies	72mm, 30mm, 120mm
Gewicht	110 gr
Input	100-240VAC, 50-60 Hz 0.8A
Uitgangsspanning	9 VDC
Uitgangsstroom	2A
Richting van connector	⊕ ⊖ ⊖

Symbol	Betekenis
	De gebruiker moet in de handleiding kijken
	CE Merk
	Elektrische- en Elektronische Afval Apparaten (WEEE). Wegwerp Elektrische- en Elektronische Afval Apparaten mogen niet als ongesorteerd gemeentelijk afval worden weggegooid maar moeten apart worden opgehaald.
	Het apparaat voldoet aan de voorschriften die door de Federale Communicaties Commissies zijn opgesteld met betrekking tot de hoeveelheid radiofrequentie uitstoot die geoorloofd zijn zodat andere apparaten niet worden geschaad.

# NEWA® SNELGIDS

Alles wat u moet weten om de NEWA® te kunnen gebruiken

Om de volledige handleiding te lezen  
gaat u naar [www.newanederland.com](http://www.newanederland.com)